

Eyestil **SYNFO**

ES

Solución oftálmica balanceada estéril que contiene hialuronato sódico 0.2%, goma xantana 0.2%, glicina 0.1% y betaina 0.25%

Indicaciones

EYESTIL SYNFO, gracias a sus componentes, protege, hidrata y lubrica la superficie ocular.

Está indicado en todos los casos de molestia y sequedad ocular causada, por ejemplo, por:

- Síndrome del ojo seco;
- Cirugía ocular;
- Reacción alérgica;
- Uso crónico de medicamentos tópicos (por ejemplo, agentes hipotonizantes oculares, gotas para los ojos con conservante, etc.);
- Uso de medicamentos sistémicos (por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal, antihipertensivos, antidepresivos, antihistamínicos, etc.);
- Menopausia;
- Envejecimiento;
- Estrés ambiental (contaminación, aire acondicionado, tabaco, viento, etc.);
- Uso prolongado de dispositivos electrónicos (ordenador, tableta, teléfono móvil);
- Uso de lentes de contacto.

El producto no contiene conservantes, por lo tanto, puede ser utilizado también por las personas que utilizan lentes de contacto.

Usuarios previstos

EYESTIL SYNFO es una solución oftálmica estéril destinada a ser utilizada por personas con molestias, irritación o sequedad ocular debida a alteraciones cuali-cuantitativas de la película lagrimal o causada por factores ambientales, uso de monitores de ordenador o lentes de contacto.

Composición

Hialuronato sódico 0.2%, goma xantana 0.2%, glicina 0.1%, betaina 0.25%, tampón Tris-HCl, cloruro de sodio, agua purificada.
Sin conservantes. Sin fosfatos.

Presentación

Frasco de 10 ml. 1 instrucciones de uso.

Características y mecanismo de acción

EYESTIL SYNFO contiene dos polímeros naturales, hialuronato sódico y goma xantana con propiedades lubricantes, hidratantes y mucomiméticas. Las propiedades reepitelizantes y antioxidantes de ambos componentes se ven aumentadas por su acción sinérgica.

EYESTIL SYNFO contiene también glicina y betaina, sustancias con acción osmoprotectora que promueven el mantenimiento de la homeostasis celular que normalmente se ve alterado en caso de sequedad ocular. La glicina y la betaina juegan un papel en la fase de remodelación del epitelio ocular durante el proceso de cicatrización de heridas, actuando como osmoprotectores en células

expuestas al estrés hiperosmótico.

Debido a la combinación de hialuronato sódico, goma xantana y osmoprotectores, **EYESTIL SYNFO** hidrata, lubrica y repara la superficie ocular, contribuyendo a restaurar su homeostasis y protegiéndola del daño oxidativo.

EYESTIL SYNFO también garantiza una sensación de alivio de larga duración y el máximo confort durante el periodo de uso del producto.


Dosis y administración

Instilar 1 gota de **EYESTIL SYNFO** cuatro veces al día en el saco conjuntival o según sea necesario.


Instrucciones de uso

Lávese/desinfecte bien las manos antes de utilizar el producto.

1. Asegúrese de que la tapa de protección esté intacta antes de su uso.
2. Antes del primer uso, quite el sello de seguridad de la tapa protectora tirando del extremo de la lengüeta en el sentido contrario a las agujas del reloj.

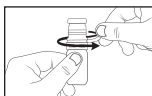

3. Retire la tapa protectora tirando de ella hacia arriba.

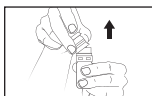


- No ejerza ninguna presión sobre el frasco antes de quitar la tapa protectora o dar la vuelta al frasco para su administración. Esto daría como resultado una deformación irreversible del frasco.
4. De la vuelta al frasco e instile 1 gota de **EYESTIL SYNFO** en cada ojo ejerciendo una ligera presión sobre el frasco, teniendo cuidado de no tocar el ojo, el párpado ni ninguna superficie con la punta del frasco. De esta manera, se puede evitar cualquier contaminación.




Debido a las características intrínsecas del frasco con dosificador para soluciones sin conservantes, a medida que el producto se va utilizando, puede ser necesario ejercer una presión mayor para permitir que las gotas fluyan.

5. Agite el frasco hacia abajo para eliminar cualquier residuo presente en la punta del gotero.

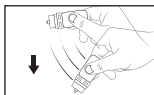

6. Cierre el frasco con la tapa protectora inmediatamente después de su uso.

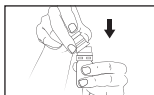

Recuerde anotar en la caja de cartón la fecha de la primera apertura del frasco.

El producto debe ser utilizado durante los seis meses siguientes a la primera apertura del frasco.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Precauciones y advertencias



No utilice **EYESTIL SYNFO** si el frasco está abierto o dañado.

Durante la aplicación, asegúrese de que la punta del frasco no entre en contacto con el ojo o los párpados o cualquier otra superficie.

Conservar a una temperatura no superior a **25°C**. No use **EYESTIL SYNFO** después de la fecha de caducidad.

No deseche el producto en el medioambiente después de su uso. Para la correcta eliminación del producto, por favor siga las legislaciones locales o nacionales.

La administración de **EYESTIL SYNFO** a niños o personas con habilidades limitadas debe ser supervisada por un adulto responsable.

Interacciones con otros medicamentos o productos sanitarios para uso ocular

Se desconocen las interacciones del producto con la administración de otros fármacos para uso

oftálmico; por lo tanto, se recomienda no utilizar otros medicamentos o productos sanitarios para uso oftálmico 10 minutos después de la administración de **EYESTIL SYNFO**.

No es necesario retirar las lentes de contacto antes de la administración de **EYESTIL SYNFO** ya que el producto no altera las características físicas, incluida la transparencia, de las lentes de contacto suaves, semi rígidas y rígidas más comunes.

Efectos adversos

El uso del producto puede causar ocasionalmente ardor leve o irritación.

Si se produce alguna de las reacciones mencionadas anteriormente, suspenda el uso de este producto.

Notificación de reacciones adversas

Cualquier reacción adversa debe ser comunicada a las autoridades locales de vigilancia o a:

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36 - 95025 Aci
Sant'Antonio (CT), Italia
e-mail: vigilance@sifigroup.com

SOLO PARA USO OCULAR TÓPICO MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Fabricante

SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36
95025 Aci S. Antonio (CT) - ITALIA

Distribuido en España por:

FAES FARMA, S.A.
Autonomía Etorbidea, 10
48940 Leioa (Bizkaia)

EYESTIL SYNFO es un producto sanitario estéril.

CE 0426

Última revisión del texto: diciembre de 2025

La información detallada y actualizada de este producto sanitario está disponible escaneando con un teléfono inteligente el código QR que aparece en las instrucciones de uso y acondicionamiento exterior. La misma información se encuentra disponible en la siguiente URL:
<http://qr.sifigroup.com/ 1G302760/>

Scan:



Symboles – Symbols – Simbolos

	Fabricant Manufacturer Fabricante		Température maximale 25°C Upper limit of temperature 25°C Límite superior de temperatura 25°C
	Marquage CE et code de l'organisme notifié CE Mark and Notified Body Code Marcado CE y Código del Organismo Notificado		Ne pas utiliser si le récipient est endommagé Do not use if package is damaged No utilizar si el envase está dañado
	Distribué par Distributed by Distribuido por		Dispositif médical Medical device Producto sanitario
	Stérilisé en utilisant une technique aseptique Sterilized using aseptic processing technique Esterilizado utilizando técnicas de procesamiento aséptico		Consultez les instructions d'utilisation Consult instructions for use Consulté las instrucciones de uso
	Numéro de lot Batch code Código de lote		QR code Código QR
	Mois et à l'année de fabrication Month and year of manufacture Fecha de fabricación		Identifiant unique du dispositif Unique device identifier Identificador único de producto
	Date de péremption AAAA-MM Use by YYYY-MM Fecha de caducidad AAAA-MM		